


# SKYLUX EnPort

電源供給等コラム付モニターハンガー懸架装置

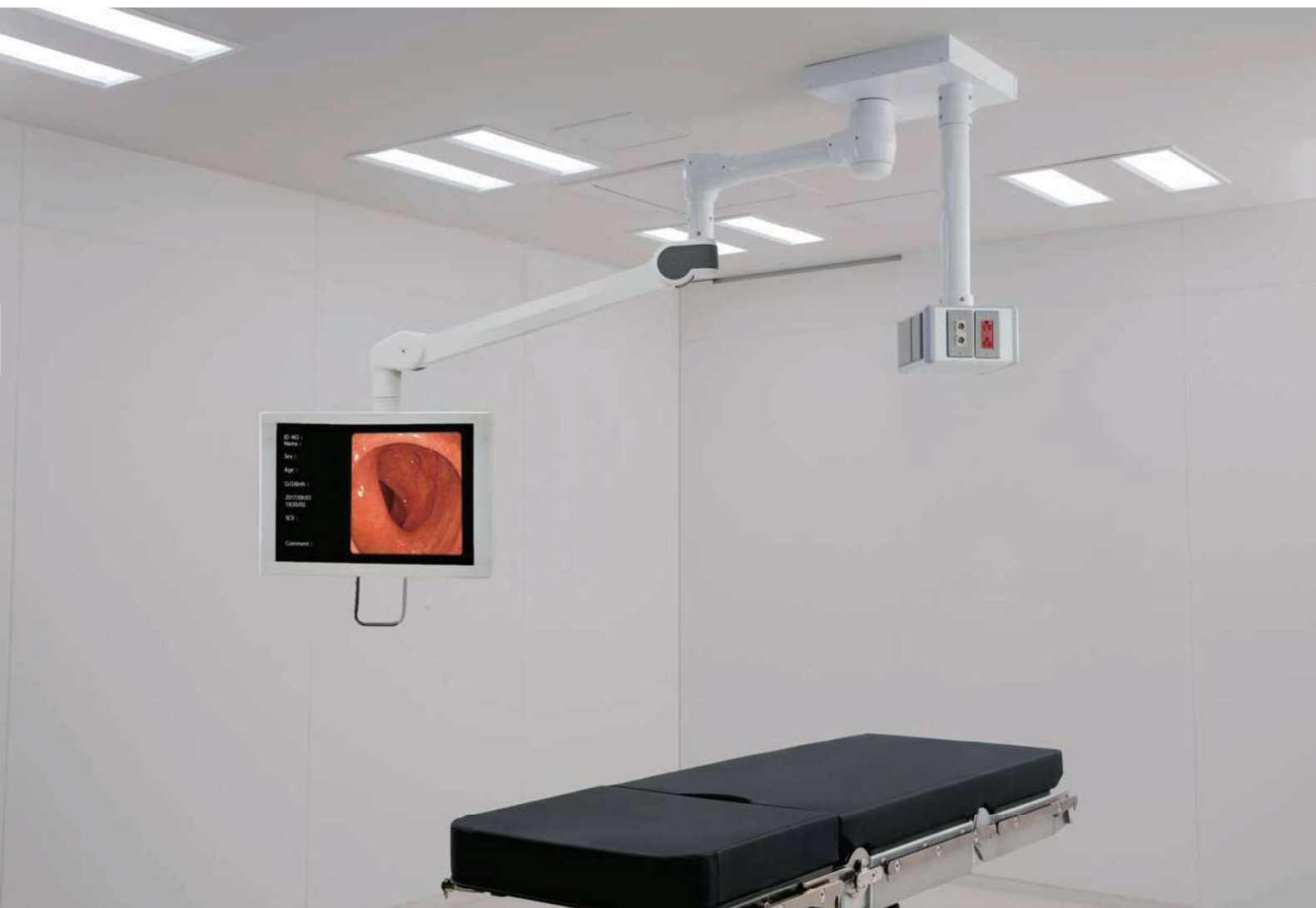

## 多機能ポート

内視鏡装置、医療ガス等への直接接続が可能。



2回線までのLANポート、  
医療用ガスアウトレット取付け可能。



過電流警報装置及び2個口コンセント。



医療用ガスアウトレット取付け可能。




術野映像対応、2回路までのSDI用  
BNC及び2個口コンセント。

※ 出荷仕様はブランクパネルになります。

## 術前のセットアップは簡単

コラムの高さは150cmの身長の方でも手が届き、且つ床に設置している機材の邪魔にならない高さに設定。

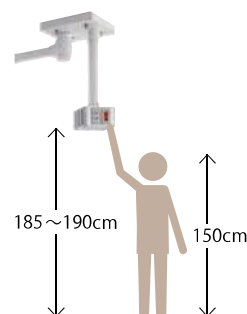


## 省スペース・コンパクト設計

検査室で取り回しがしやすいショートアームを採用したモニター懸架システムと、最小限に機能を抑えたコラムヘッドのコンパクトな設計。


## 天井設置で、床をすっきり

床面を這わしていたホースやコードをコラムに接続することで煩雑な取り回しを解消。

### 外形図

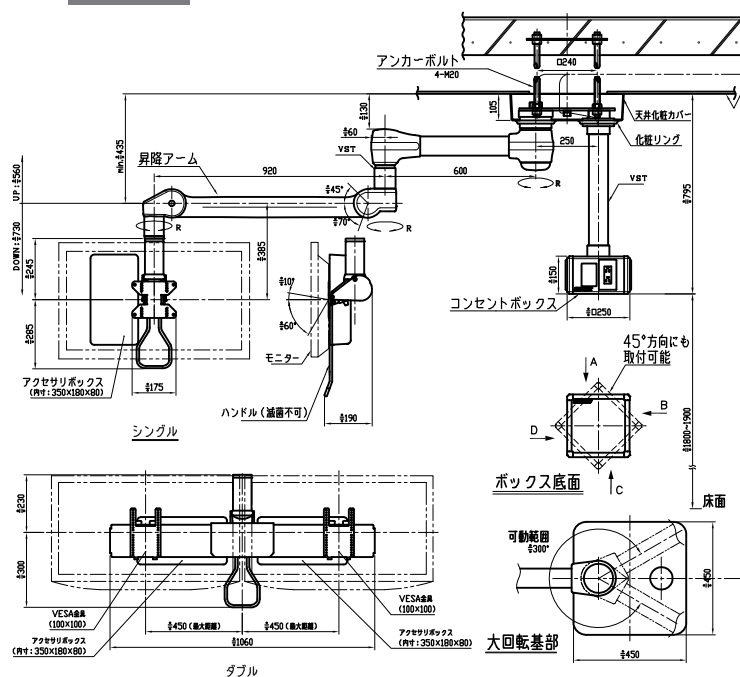

## 上面图

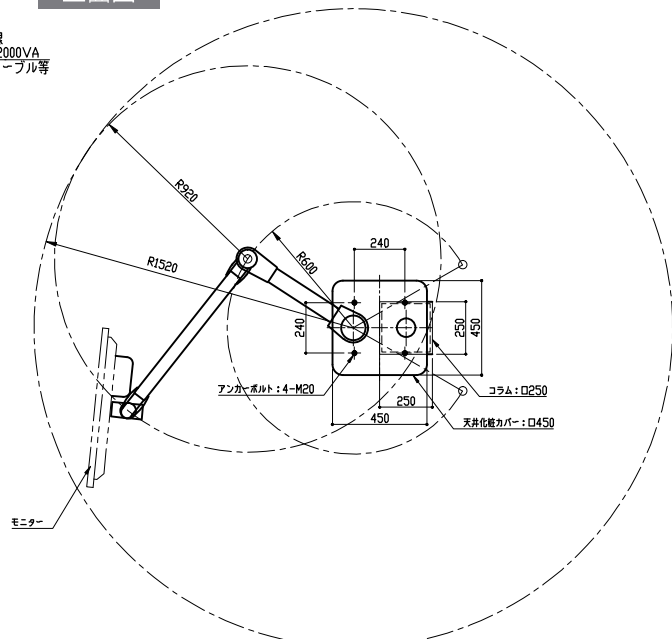

※上記仕様は参考となります。実際の設置製品の仕様とは異なる場合があります。

## モニターアームラインナップ

|               | <br>モニターハンガー シングル | <br>モニターハンガー ダブル | <br>ダブルアーム<br>モニターハンガー |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応モニター (インチ)  | -42inch                                                                                            | -32inch (×2)                                                                                       | -42inch(1アームにつき)                                                                                          |
| スプリングアーム 荷重範囲 | 13-26kg (MD26+) 18-40kg (MD40+)                                                                    | 18-40kg (MD40+)                                                                                    | 13-26kg (MD26+) 18-40kg (MD40+)                                                                           |
| 付属品           | ステンレスハンドル<br>アクセサリボックス                                                                             | ステンレスハンドル<br>アクセサリボックス                                                                             | ステンレスハンドル<br>アクセサリボックス                                                                                    |
| モニターチルト角度     | +10°/-60°                                                                                          | +10°/-60°                                                                                          | +10°/-60°                                                                                                 |

## モニターハンガー仕様詳細

|                             |           |                                                                         |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 使用シーン                       |           | 手術室、内視鏡室、診断室                                                            |
| スプリングアーム最大荷重                |           | MD26+ : 26kg、MD40+ : 40kg                                               |
| 重量                          | モニターハンガー  | シングル : 約 3.5kg (アクセサリボックスなし、ハンドルなし)<br>ダブル : 約 7kg (アクセサリボックスなし、ハンドルなし) |
|                             | ステンレスハンドル | 約0.6kg                                                                  |
|                             | アクセサリボックス | 1kg / 個                                                                 |
| アクセサリボックス                   |           | サイズ 350×180×80mm<br>(シングルス用)に 1 つ / ダブル用に 1 つまたは 2 つ)                   |
| スプリングアーム上下昇降範囲<br>(上方 / 下方) |           | +45° ~70°<br>MD26+、MD40+ : 547mm/727mm                                  |
| VESA                        |           | 100×100、100×200                                                         |

## コラム部仕様

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 電源電圧         | AC100V (20 Aの過電流警報装置付) |
| 電源口数         | 2 個口 2ヶ所 計4 個口         |
| BNC 口数       | 2 個口 1ヶ所 計2 個口         |
| LAN 口数       | 2 個口 1ヶ所 計2 個口         |
| ガス用アウトレット対応数 | 2ヶ所※2 (二酸化炭素、吸引)       |
| 動作環境         | 温度：5～35℃ 湿度：30～70%     |
| 推奨天井高        | 2500～3000 mm           |

## 製品仕様

|        |               |
|--------|---------------|
| 項目・機種  | EP01V         |
| 用途     | 電源等供給及びモニター懸架 |
| 機器構成   | コラム＋モニターハンガー  |
| 全体質量※1 | 約 100 kg      |

※1 モニターの質量は含みません。  
 ※2 出荷仕様はブラנקパネルになります。  
 ※改良などの理由により予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。  
 あらかじめ、ご了承ください。

本社／ 関東支店  
東京都千代田区西神田 2-3-16 6F  
TEL：03-5212-6021 / FAX：03-5212-6022

大阪支店  
大阪府吹田市江の木町 27-15  
TEL：06-6192-7570 / FAX：06-6192-7571

仙台支店  
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4  
TEL：022-304-3631 / FAX：022-304-3633

広島支店  
広島県広島市南区段原 4 丁目 21-6  
ベルヴェー段原101  
TEL：082-510-2015 / FAX：082-510-2016

北関東支店  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1  
TEL：048-658-0077 / FAX：048-658-0078

福岡支店  
福岡県大野城市瓦田 5-3-29  
TEL : 092-588-3322 / FAX : 092-588-3323

名古屋支店  
愛知県春日井市花長町2-7-35  
TEL.0568-36-8920 / FAX.0568-36-8921

埼玉工場  
埼玉県八潮市大字大曾根 1526-1  
TEL：048-994-2621 / FAX：048-994-2622